
# ASEPTANIOS AD



## Désinfectant par voie aérienne

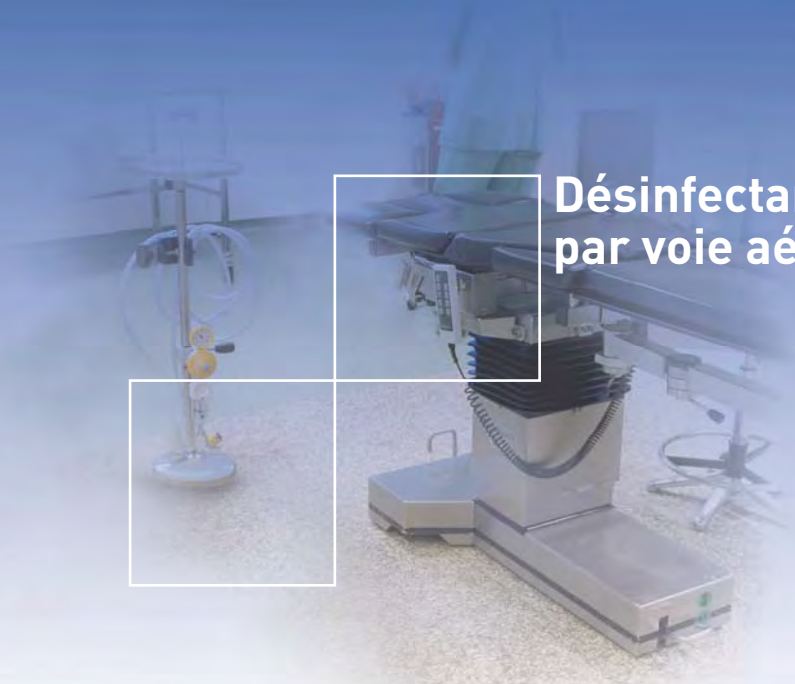


### SECURITE

- Produit sans aldéhyde, sans métaux lourds
- Produit à base d'acide peracétique: maîtrise de la corrosion
- Procédé ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 validé

### EFFICACITE

- Large spectre dès 30 minutes.
- Ne laisse pas de trace au séchage, ni aucun film gras sur les surfaces après aérosolisation.

### SIMPLICITE

- Produit prêt à l'emploi.
- Calcul automatique du temps de diffusion par l'AEROSEPT COMPACT 250.

## INDICATIONS

Désinfection par voie aérienne des surfaces et dispositifs médicaux préalablement nettoyés.

## CARACTERISTIQUES

- Utilisation hors présence humaine
- Solution limpide incolore
- Utilisable dans le diffuseur AEROSEPT COMPACT 250
- Consommation : 7 ml / $m^3$

AÉROSOLISATION AUTOMATIQUE



laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

ENGAGEMENT ANIOSAFE

AFAQ ISO 9001 — CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM



# ASEPTANIOS AD

## Désinfectant par voie aérienne

## MODE D'EMPLOI : Utilisation hors présence humaine.

1. Insérer le bidon dans l'AEROSEPT COMPACT 250. Placer l'appareil dans un angle de la pièce, préalablement nettoyée. Ajuster la programmation en calculant le volume à traiter.
2. Activer l'AEROSEPT COMPACT 250 et quitter la pièce.
3. La diffusion se déclenche. Le temps de diffusion est automatiquement calculé selon le volume que vous aurez affiché.
4. **Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée**
   Puis s'équiper d'un masque de protection pour entrer dans la pièce.
   Ventiler la pièce efficacement (6 renouvellements d'air) avant réutilisation de la pièce.

NB : S'assurer auprès des Laboratoires ANIOS de la compatibilité du produit avec les matériaux sensibles aux oxydants.

## COMPOSITION

Solution stabilisée d'acide peracétique (+/- 1200 ppm) et de peroxyde d'hydrogène.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage : entre +5°C et +25°C en position verticale.
Dispositif médical de la classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée)

## CONDITIONNEMENT

- 4 bidons de 2 litres.....Réf. 2122.724




## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Le procédé ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 est efficace selon la norme française d'application NF T 72-281 (bactéricide, fongicide, virucide, sporicide) – 7 ml/m³ / 55°C :

| Actif sur | Réduction | Temps de contact |
|---|---|---|
| **Bactéries**<br>•Pseudomonas aeruginosa<br>•Staphylococcus aureus<br>•Escherichia coli<br>•Enterococcus hirae | ≥ 6 log | 30 min. |
| •Acinetobacter baumannii (ßLSE)<br>•Enterobacter cloacae (ßLSE)<br>•Enterococcus faecium (ERV) | ≥ 5 log | 15 min. |
| •Klebsiella pneumoniae (ßLSE)<br>•Staphylococcus aureus (SARM) | ≥ 6 log | 30 min. |
| **Levures**<br>•Candida albicans | ≥ 6 log | 15 min. |
| **Moisissures**<br>•Aspergillus niger | ≥ 6 log | 120 min. |
| **Virus**<br>•Poliovirus | ≥ 4 log | 60 min. |
| **Spores de bactéries**<br>•Bacillus subtilis | ≥ 5 log | 120 min. |
| •Clostridium difficile | ≥ 4 log | 60 min. |

La solution ASEPTANIOS AD est bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697), mycobactéricide (EN 14348, EN 13697), virucide (EN 14476), sporicide (EN 13704).

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR2122-120524 - Photos non contractuelles